

1 Slå Tri Auto mini på: Trykk på hovedbryteren.

Visningen Standby vises.



2 Velge minnenummer: Trykk på pluss- eller minus-bryteren.

* Det er seks minner


Fabrikkinnstillingene vises nedenfor.

Innstilling	Minne		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Speed (rpm) (Hastighet (o/min))	400	400	250
Torque Reverse (Ncm) (Momentavhengig revers (Ncm))	1,0	0,8	0,6

3 Starte motoren: Trykk på hovedbryteren igjen.

Visningen Torque (Moment) vises.

* Hvis du holder inne hovedbryteren, vil motoren kun gå mens du holder bryteren inne og stoppe når du slipper den.

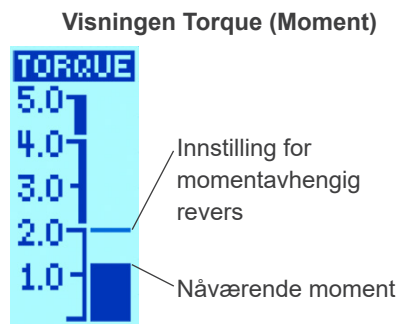

4 Stoppe motoren: Trykk på hovedbryteren igjen.

Visningen Standby vises igjen.