


1 Accendere il Tri Auto mini: premere l'interruttore principale.

Apparirà la visualizzazione di standby.

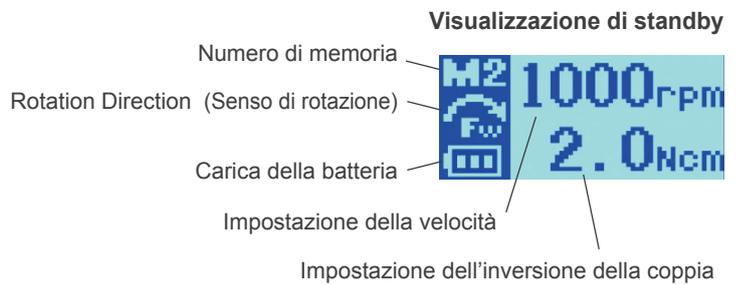

2 Selezionare il numero di memoria: premere i pulsanti + o -.

* Esistono sei memorie.

le impostazioni di fabbrica sono indicate di seguito.


Impostazione	Memoria		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Speed (Velocità, rpm)	400	400	250
Torque Reverse (Inversione della coppia, Ncm)	1.0	0.8	0.6

3 Avviare il motore: premere di nuovo l'interruttore principale.

Apparirà la visualizzazione della coppia.

* Se si avvia il motore tenendo premuto l'interruttore principale, il manipolo funzionerà solo finché sarà premuto l'interruttore e si arresterà al rilascio dello stesso.

Visualizzazione della coppia

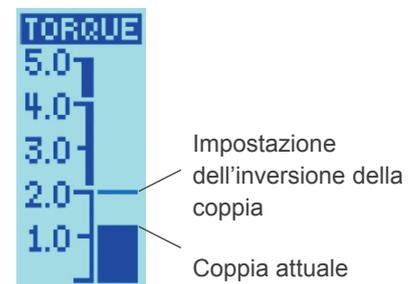

4 Arrestare il motore: premere di nuovo l'interruttore principale.

Riapparirà la visualizzazione di standby.

