

Tri Auto ZX2+ kiiralustusjuhend

Enne kasutamist ja ümbertöötlemine



2024-01-21
Pub. No.: K352-80146-500 (et)

Lisateabe saamiseks skannige QR-kood. ▶




* Enne seadme Tri Auto ZX2+ kasutamist lugege kindlasti kaasasolevat kasutusjuhendit.
* Kandke ümbertöötlemise ajal sobivaid kindaid.

Enne kasutamist

Komponendi kokkupanek


1. toiming

Nurkotsiku ühendamine

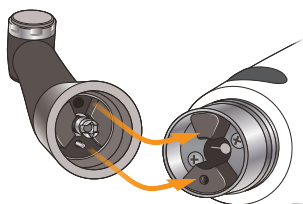



2. toiming

HP kaitseümbrise pealepanek

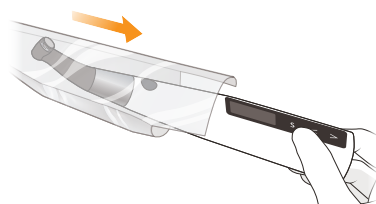

3. toiming

Sondi juhtme ühendamine

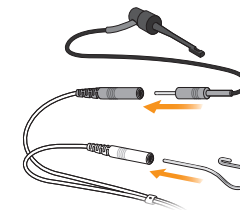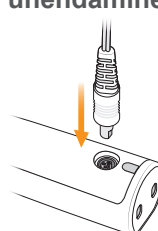


⚠ ETTEVAATUST

Ühendage kindlasti valge sondi konektori külge vastandelektrood (konks).

4. toiming

Viili paigaldamine

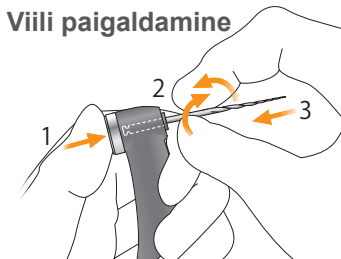

Toimivuse kontrollimine


1. toiming

Apeksi asukoha funktsioon

Lülitage toide sisse. Puudutage vastandelektroodi (konksu) viili ja viilihoidiku otsas oleva klambriga; veenduge, et kõik mõõdiku näidiku ribad LCD-ekraanil süttiksid.

⚠ HOIATUS

Kui kõik näidiku ribad ei sütti, lõpetage kohe seadme kasutamine ja laske see professionaalil parandada.


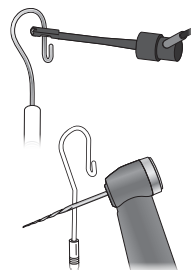


2. toiming

Mootori pöörlemine


Valige «m2» (OGP2-režiim). Vajutage põhilülitit ja veenduge, et mootor töötaks sujuvalt.

ⓘ Kui mootor ei pöörle korralikult või esineb ebatavalisi helisid või vibratsiooni, lõpetage kohe seadme kasutamine ja võtke ühendust kohaliku edasimüüja või ettevõttega J. MORITA OFFICE.

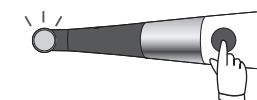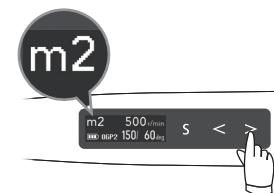

Toite sisse/välja lülitamine

Sees

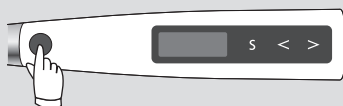

Väljas



Kalibreerimine

(Enne esmakordset kasutamist pärast ostmist, pärast nurkotsiku vahetamist, kui toiming OTR käivitub korrapäraselt või juhuslikult jne.)

Ühendage nurkotsik. Kui seade on välja lülitatud, hoidke vasakpoolset seadistamise lülitit (<) all ja seejärel vajutage põhilülitit.

Vajutage parempoolset seadistamise lülitit (>) kalibreerimise alustamiseks. Pärast kalibreerimist naaseb seade automaatselt ooteloleku kuvale.





Testimisseadmega kontrollimine (kord nädalas)

Lülitage toide sisse. Ühendage testimisseade. Kontrollige mõõdiku näitu.

• Kui mõõdikul süttivad kaks rida number 1 juures: tavapärane

• Kui mõõdikul süttib kaks rida rohkem või vähem kui rida 1 juures: lõpetage kohe seadme kasutamine ja laske see professionaalil parandada.

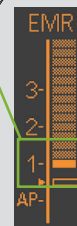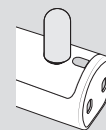

Kuva seadistused


Järgmisi seadistusi saab muuta olenevalt kasutaja eelistustest.

☞ Vaadake kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Käsi-seadme teised funktsioonid“.

Domineeriv käsi




EMR-i kuva suund

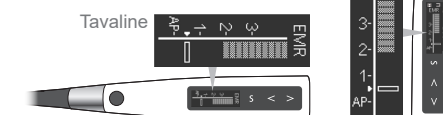

Ümbertöötlemine – pärast iga kasutust

Pärast kasutamist


1. toiming
Toite väljalülitamine

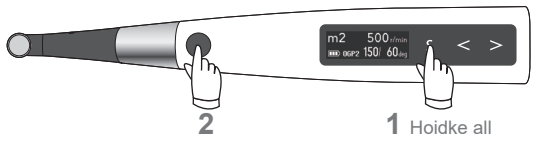

2

1 Hoidke all


2. toiming
Viili väljavõtmine

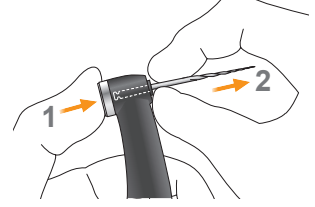

1


2

3. toiming
HP kaitseümbrise eemaldamine

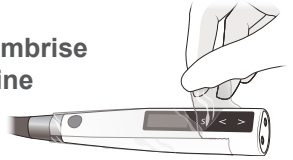

⚠ HOIATUS
Ärge kunagi kasutage HP kaitseümbrist uuesti.

4. toiming
Aku laadimine




Steriliseerimine

Steriliseeritavad osad

- a. Viilihoidik
- b. Vastandelektrood
- c. Pika viili hoidik
- d. Nurkotsik
- e. Käsiseadme hoidik*
- f. Väline viili elektrood (otsikuga)*


1. toiming
Eeltötlus

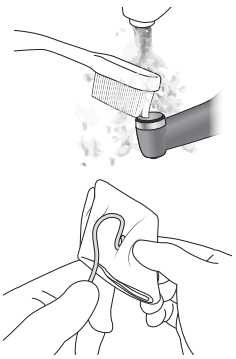

2. toiming
Puhastamine ja desinfitseerimine
Pesur-desinfitseerija kasutustingimused

Seadme nimi	Miele G7881
Režiim	Vario TD (puhastusaeg: 5 minutit)
Puhastusvahend (kontsentratsioon)	neodisher MediClean (0,3% kuni 0,5%)
Loputamine (kontsentratsioon)	neodisher MediKlar (0,03% kuni 0,05%)

3. toiming
Määrimine (ainult nurkotsik)
Määrige nurkotsikut õliga LS OIL. Pühkige kogu liigne õli nurkotsikult ära.




Pange siia viis tilka õli LS OIL ja oodake 10 minutit.

1 tilk

1 tilk

4. toiming
Pakendamine



5. toiming
Steriliseerimine

Soovitus
Riik: USA

Steriliseerija tüüp	Temperatuur	Aeg (minutid)	Kuivamisaaeg pärast steriliseerimist (minutid)
Gravitatsioon	+132 °C	15	15
	+121 °C	30	

Riik: väljaspool USA-d


Dünaamiline õhu eemaldamine	Temperatuur	Aeg (minutid)	Kuivamisaaeg pärast steriliseerimist (minutid)
Gravitatsioon	+134 °C	3	10
	+121 °C	5	
Gravitatsioon	+134 °C	min 6	10
	+121 °C	min 60	

Desinfitseerimine

Desinfitseeritavad osad


- g. Mootoriga käsiseade
- h. Sondijuhe
- i. Akulaadija
- j. Juhtvarras
- k. Testimisseade

1. toiming
Eeltötlus



2. toiming
Puhastamine ja desinfitseerimine
Desinfitseerijad, mille J. MORITA MFG. CORP on heaks kiitnud.

Desinfitseerimisvahend	Riik
Etanool (70–80 mahu%)	USA
Opti-Cide3 (puhastuslapid)	
FD366 sensitive (puhastuslapid)	Väljaspool USA-d

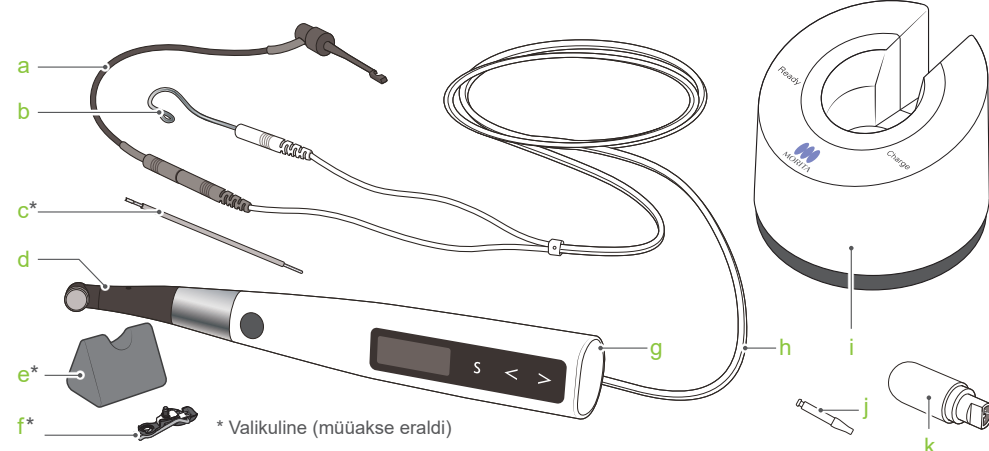

a

b

c*

d

e*

f*

g

h

i

j

k

* Valikuline (müüakse eraldi)

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid: selles juhendis kasutatud ettevõtete, toodete, teenuste jne nimede osad võivad sisaldada kas igale ettevõttele kuuluvaid kaubamärke või registreeritud kaubamärke.